

Lähettäjä	Viivakoodi (liimaa viivakoodi tähän SEKÄ kitin minigrip-pussin päälle)
Asiakkaan/potilaan nimi	Täydellinen henkilötunnus
Näytteenottopäivä klo	Näytteen tunnistekoodi/koodit
Lähettävä lääkäri	Puhelinnumero

6372 Pp-BaktNh, Bakteeri, nukleiinihappo (kvant), ientasku

Parocheck- tutkimus kattaa seuraavat bakteerit:

Actinobacillus (nykyisin: Aggregatibacter) actinomycetemcomitans (A.a.), Actinomyces viscosus (A.v.), Tannerella forsythensis (T.f.), Campylobacter rectus (C.r.), Treponema denticola (T.d.), Eikenella corrodens (E.c.), Prevotella intermedia (P.i.), Peptostreptococcus micros (nykyisin: Parvimonas micra)(P.m.), Porphyromonas gingivalis (P.g.) ja Fusobacterium nucleatum (F.n.).

Näytteenotto-ohjeet

Näytesetti sisältää neljä eriväristä mikroputkea. Samalta potilaalta voidaan ottaa kitillä enintään neljä eri kohdista kerättyä näytettä TAI vaihtoehtoisesti otettavat näytteet voidaan yhdistää yhteen näyteputkeen, jolloin paperinastat tutkitaan yhtenä näytteenä. Näyte otetaan näytteenottoasetin mukana tulevilla steriileillä paperinastoilla.

1. Ennen näytteenottoa supragingivaalinen plakki on poistettava.
2. Näyte tulee ottaa ennen hoitotoimenpiteitä.
3. Paperinasta(t) viedään steriileillä pinseteillä ientaskuun ja annetaan olla paikoillaan 15 sekuntia.
4. Tämän jälkeen paperinasta(t) suljetaan tyhjiin, setin mukana tulleeeseen näytekuljetusputkeen.
5. Kuhunkin näytteen sisältävään näyteputkeen tulee kirjoittaa näytteen tunnistekoodi ja tiedot tulee merkitä alla olevaan näyteputkikohtaisten tietojen taulukkoon.
6. Yhteen näytekuljetusputkeen voi laittaa enintään viisi paperinastaa, jotka silloin tutkitaan yhtenä näytteenä (pooli).
7. Näyteputket pakataan takaisin setin minigrip-pussiin lähetteen kanssa. Lähetys huoneenlämmössä tai viileässä.

Näytteiden mukana on lähetettävä tämä lähetelomake huolellisesti täytettynä.
Taustatiedot

-
- lievä parodontiitti
-
-
- kohtalainen parodontiitti
-
-
- merkittävä parodontiitti
-
-
- refraktorinen parodontiitti

-
- tupakoi
-
-
- diabetes
-
-
- vuototaipumus

-
- antibioottiallergia
-
-
- antibioottihoito: _____
-
-
- hammasimplantti

Muut kliiniset taustatiedot:



Näyteputkikohtaiset näytetiedot

(kirjoita kuhunkin näytteen sisältävään näyteputkeen viivakoodin näytetunniste)

	hammas/alue: _____ syvyys: _____		hammas/alue: _____ syvyys: _____
	hammas/alue: _____ syvyys: _____		hammas/alue: _____ syvyys: _____

 paperinastat tutkitaan yksittäin erikseen

 paperinastat tutkitaan poolina (yksi näyteputki missä useampi paperinasta)

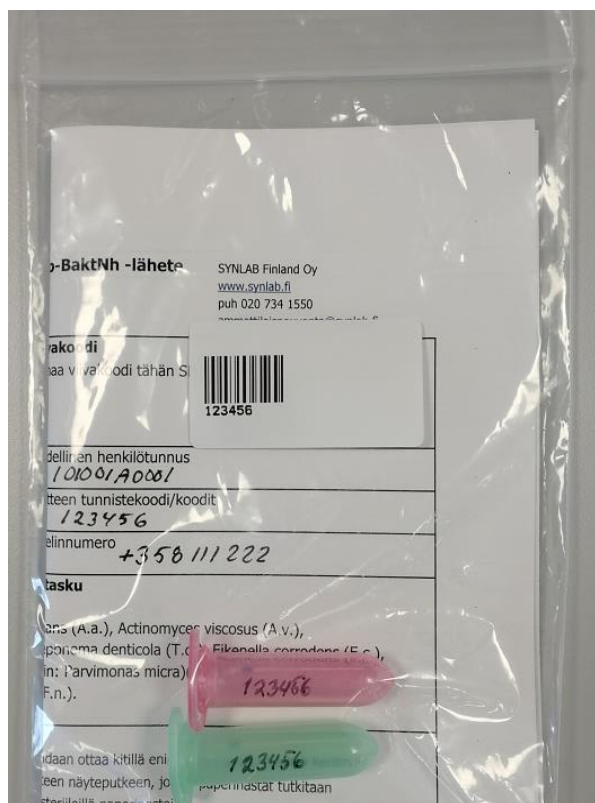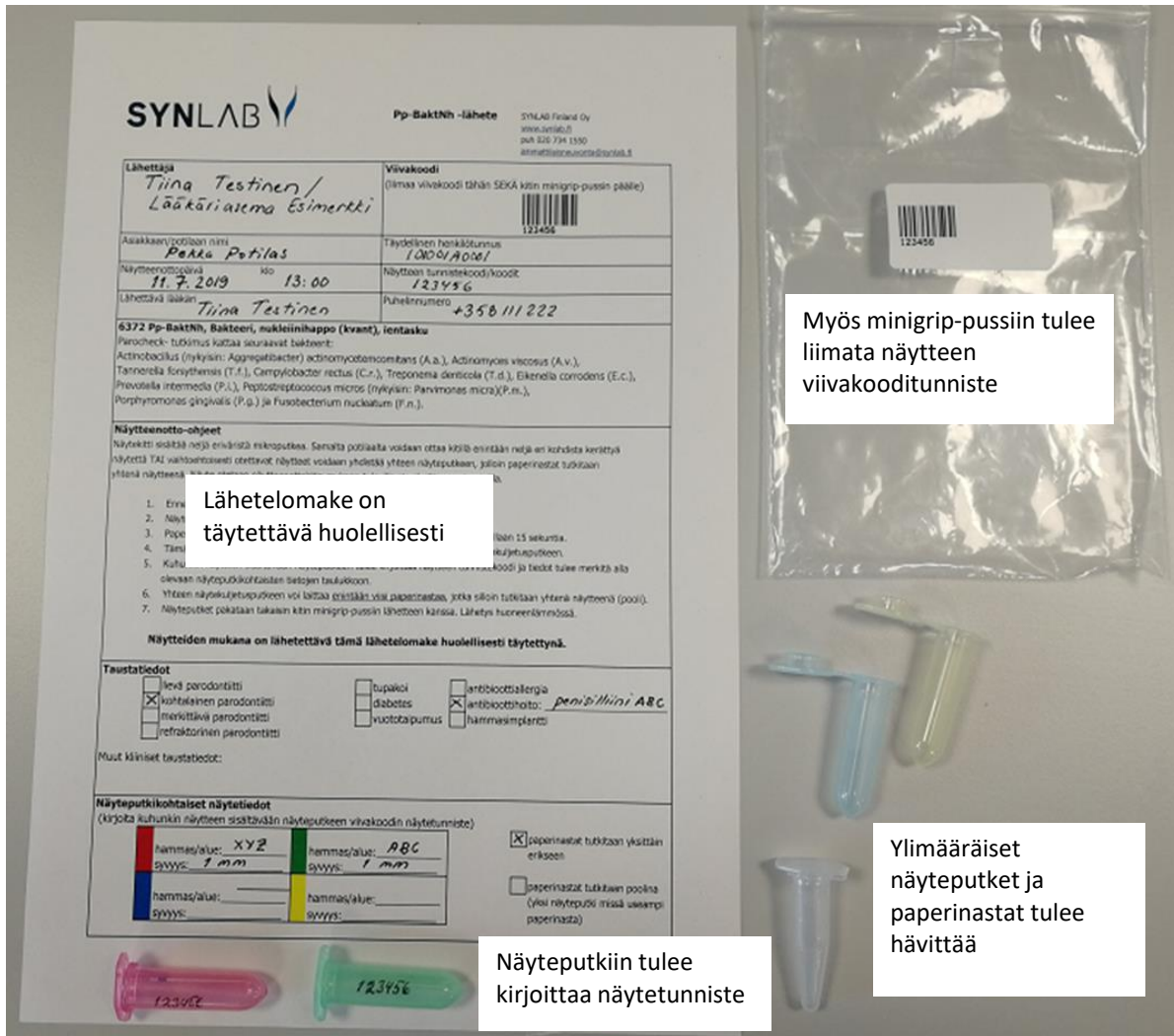

Lähetelomake lähetetään näytteiden kanssa samassa minigrip-pussissa